

Kent polish

MINT FLAVOUR

fr

Pâte
prophylactique
goût mentholé

en

Prophylaxis
paste
mint flavour

es

Pasta
profiláctica
sabor menta

it

Pasta
profilattica
gusto mentolato

pt

Pasta
profilática
sabor mentolado

Pâte prophylactique goût mentholé

fr

Contient exclusivement des substances aromatiques naturelles, ne contient pas de fluor. Les mélanges d'abrasifs utilisés dans les différentes versions sont sélectionnés pour éliminer le maximum de plaque dentaire et de tartre sans léser l'émail. Les propriétés thixotropiques sont soigneusement contrôlées afin de garantir un transfert aisé vers la cupule ou la brosse sans que les vitesses de rotation utilisées en prophylaxie ne provoquent d'éclaboussures.

Indications :

Utilisée pour éliminer la plaque dentaire et le tartre.

Mode d'emploi :

La pâte à polir a des propriétés thixotropiques. On peut donc augmenter sa fluidité si besoin est en remuant doucement la pâte avant usage. Pour obtenir de meilleurs résultats, utiliser une pièce à main de type prophy et une combinaison de cupule/brossette. Appliquer de la pâte sur la cupule caoutchouc/brossette et passer lentement celle-ci sur chaque dent, en s'assurant que le bord de la cupule/brossette passe en-dessous du bord libre de la gencive et s'introduise dans le sillon gingival. Répéter l'opération pour chaque dent jusqu'à ce que toutes les surfaces aient été traitées. Un fil dentaire non ciré peut être utilisé pour retirer l'excès de pâte entre les zones interproximales.

Précautions :

Remettre le couvercle après usage.

Conservation :

Conserver dans un endroit sec et frais (5-25°C).

Prophylaxis paste mint flavour

en

Contains only natural flavourings and no fluoride. The blends of abrasives used in the various grades are selected to maximise the removal of plaque and tartar without appreciable abrasion of enamel. The thixotropic properties are carefully controlled to ensure easy transfer to cup or brush without undesirable spattering at the rotation speeds used in prophylaxis.

Indications:

Use for the removal of plaque and tartar from patients teeth.

Directions for use:

The prophypaste is thixotropic, so, if desired fluidity can be increased by gentle spatulation before use. Replace lid after use. For best results, use a prophy type handpiece and rubber cup/bristle brush combination. Fill rubber cup/bristle brush with paste and run at low speed over each tooth surface, making sure that the edge of the cup/bristle brush goes below the free margin of the gingiva into the gingival sulcus. Repeat this procedure for each tooth until all exposed surfaces have been treated. Unwaxed dental floss may be used to remove any excess paste through interproximal areas.

Precautions:

Replace lid after use.

Storage:

Store in a cool dry place (5-25°C).

Pasta profiláctica sabor menta

es

Contiene únicamente aromatizantes naturales y no contiene flúor. Las mezclas de los abrasivos utilizados en los diversos grados son seleccionados especialmente para maximizar la eliminación del sarro y de la placa, sin una abrasión apreciable del

esmalte. Las propiedades tixotrópicas están cuidadosamente controladas para garantizar una fácil transferencia a la taza de goma o al cepillo, evitando salpicaduras no deseadas al trabajar a las velocidades de rotación propias de la profilaxis.

Indicaciones:

El producto se utiliza para eliminar la placa y el sarro de los dientes de los pacientes.

Instrucciones de utilización:

La pasta profiláctica es tixotrópica, de modo que es posible aumentar su fluidez removiéndola suavemente con una espátula antes de su utilización. Vuelva a colocar la tapa del envase después del uso. Para obtener mejores resultados, se recomienda utilizar una pieza de mano de tipo profiláctico y una combinación de taza de goma/cepillo de cerdas. Coloque la pasta en la taza de goma/cepillo de cerdas y pásela a baja velocidad por la superficie de cada diente, asegurándose de que el borde de la taza/cepillo de cerdas pasa por debajo del borde libre de la encía y se introduce en el surco gingival. Repita este procedimiento con cada diente hasta que todas las superficies expuestas hayan sido tratadas. Es posible utilizar hilo dental sin cera para eliminar el exceso de pasta de las zonas interproximales.

Precauciones:

Vuelva a colocar la tapa del envase después del uso.

Almacenamiento:

Guardar en un sitio fresco y seco (5-25°C).

Pasta profilattica gusto mentolato

it

Contiene esclusivamente sostanze aromatiche naturali, non contiene fluoro. Le miscele di abrasivi utilizzate nelle diverse versioni sono selezionate per eliminare al meglio la placca dentale e il tartaro, senza danneggiare lo smalto. Le proprietà tixotropiche sono controllate accuratamente per garantire un trasferimento agevole verso la coppetta o la spazzola, senza che le velocità di rotazione utilizzate in profilassi producano schizzi.

Indicazioni:

Utilizzata per rimuovere la placca dentale e il tartaro.

Istruzioni per l'uso:

La pasta lucidante presenta proprietà tixotropiche. Se necessario, la fluidità della pasta può essere aumentata agitandola delicatamente prima dell'uso. Per ottenere risultati migliori, utilizzare uno strumento manuale di tipo Prophylax e una combinazione di coppetta/spazzola. Applicare la pasta sulla coppetta in gomma/spazzola e stenderla lentamente su ogni dente, assicurandosi che il bordo della coppetta/spazzola passi sotto il bordo libero della gengiva nel solco gengivale. Ripetere l'operazione per ogni dente fino al trattamento completo di tutte le superfici. Filo interdentale non cerato utilizzabile per eliminare gli eccessi della pasta presente nelle zone interproximali.

Precauzioni:

Richiudere il coperchio dopo l'uso.

Conservazione:

Conservare in un luogo fresco e asciutto (5-25°C).

Pasta profilática sabor mentolado

pt

Contém apenas aromas naturais. Sem flúor. As misturas de abrasivos empregues nos diversos grãos são selecionadas para otimizar a remoção da placa bacteriana e do tártaro, sem que haja uma forte abrasão do esmalte. As propriedades tixotrópicas são cuidadosamente controladas, de modo a garantir a fácil transferência para a taça ou para a escova, sem ocasionar salpicos indesejáveis pela velocidade de rotação utilizada na profilaxia.

Indicações:

Para remover a placa bacteriana ou tártaro dos dentes.

Instruções de utilização:


A pasta profilática é tixotrópica, pelo que, se preferir, é possível aumentar a sua fluidez, misturando suavemente com uma espátula antes de usar. Voltar a tapar depois de usar. Para um resultado mais eficaz, utilizar uma peça de mão profilática e uma cúpula de borracha/escova. Aplicar no cúpula/escova a pasta e passar em velocidade lenta sobre a superfície de cada dente, tendo o cuidado de fazer com que o bordo da taça/escova passe por baixo da margem livre da gengiva, até ao sulco gengival. Repetir esta operação para cada dente, até todas as superfícies expostas terem sido tratadas. Usar fio dental sem cera para remover os excessos de pasta nos espaços interproximais.

Precações:

Voltar a tapar depois de utilizar.

Conservação:

Conservar em local fresco e seco (5-25°C).

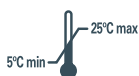

Advena Ltd., Tower Business Centre,
2nd Floor, Tower Street, Swatar,
BKR 4013, MALTA



CADENCE
2 bis, chemin du Loup
93290 Tremblay-en-France
FRANCE



Advanced Healthcare Ltd
Unit 2-4 Leavers Estate
Chiddingstone Causeway
Tonbridge, Kent TN11 8JU
UNITED KINGDOM